


Spécifications *Perfect' Skin*:

Aspiration	: De 0 à 90 KPa
Débit	: De 0 à 100 ml/min
Alimentation électrique	: 220 Vac / 50 Hz / 80 VA
Taille	: 48 x 36 x 28 (PxLxH)
Poids	: 8 Kgs



Perfect' Skin

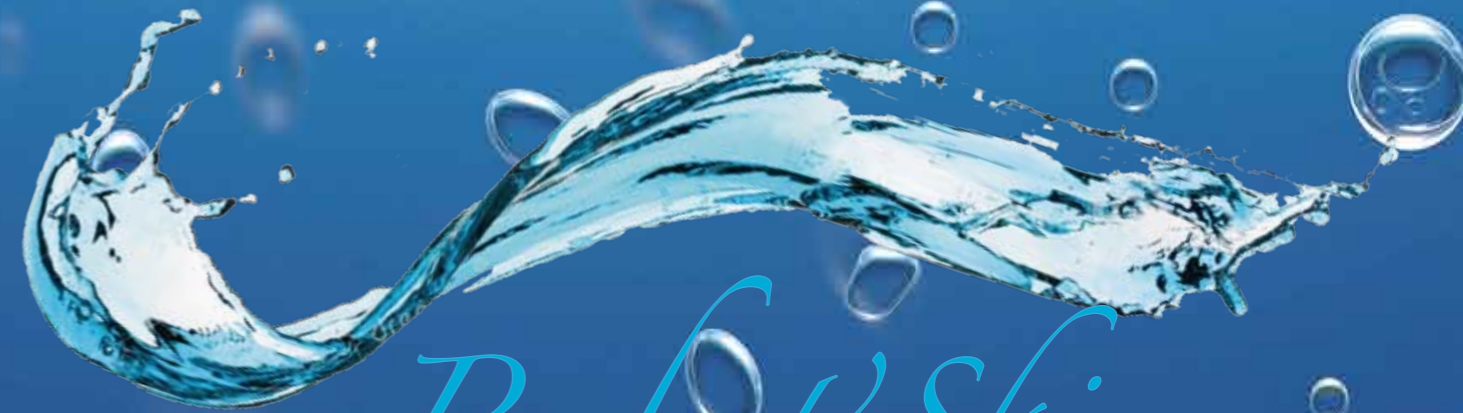

- 4 types d'infusions différentes :
- 1 solution hydratante à base d'acide hyaluronique non réticulé
 - 1 solution hydratante et réparatrice à base d'acide hyaluronique et de vitamines
 - 1 solution clarifiante à base d'acide salicylique
 - 1 solution dépigmentante à base d'acide kojique

Le kit Miraroller contient :

- 6 rollers stériles
- 1 pièce à main pour une application sans infusion


4 longueurs d'aiguilles différentes pour :

- une hydratation du visage sur peau fine (0,3 mm)
- une hydratation du visage sur peau épaisse (0,5 mm)
- une stimulation collagénique (0,75 mm)
- une destruction des capitons fibreux du corps (1 mm)



DermaInfusion

Sublimez votre peau

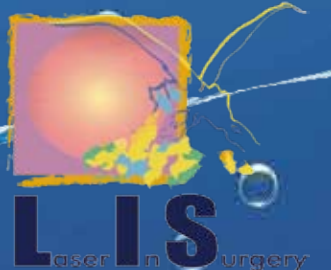

Perfect'Skin : La Dermalinfusion dans le Traitement des signes de l'Age, de l'Acné, des Vergetures et bien plus...

Perfect'Skin Needling

L'efficacité de la dermalinfusion alliée à la précision et la profondeur des micro-aiguilles.

Deux types de rollers :


Visage muni de 150 micro-aiguilles
Corps muni de 250 micro-aiguilles

Des rollers équipés de micro aiguilles de longueurs différentes :

0,3 mm pour traiter les peaux fines,
0,5 mm pour traiter les peau plus épaisses,
0,75 mm et 1 mm pour les zones corporelles, et les traitements profonds (cicatrices, vergetures)



Un processus naturel induit par les micro-aiguilles

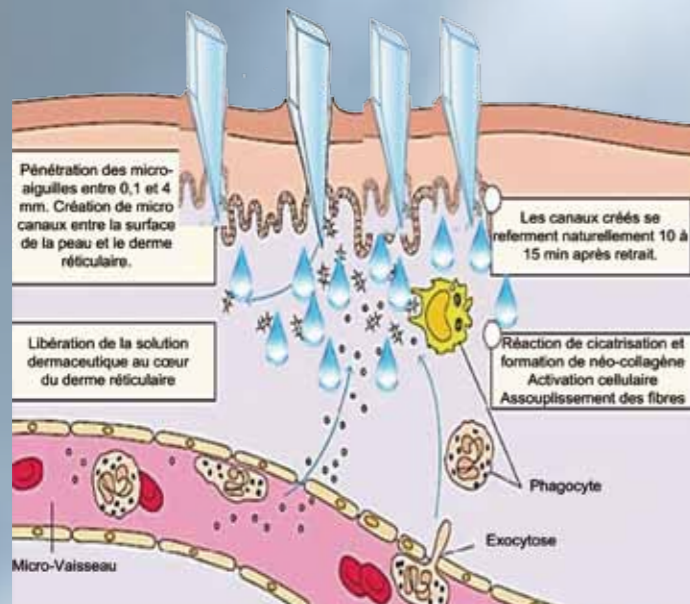

Effet en fonction de la profondeur des micro-aiguilles et du produit choisi :

Hydratation	peaux déshydratées, sèches, endommagées par les Uvs,
Rééquilibrage	peaux grasses, acné,
Assouplissement	cicatrices d'acné, vergetures,
Régénération	rides, ridules,
Eclaircissement	teint brouillé, taches pigmentaires.

4 formules différentes

pour une prise en charge complète de la peau



DERMOLISSAGE CLARIFYING FORMULA (ACNE & ABRASION)

Principe actif dominant : Acide Salicylique
(Organic Carboxylic Acid, BHA [Beta Hydroxy Acid])



DERMOLISSAGE HYDRATING FORMULA

Principe actif dominant : Sodium Hyaluronate
(acide hyaluronique pure)



DERMOLISSAGE BRIGHTENING FORMULA (TACHES PIGMENTAIRES & LÉSIONS ACTINIQUES)

Principe actif dominant : Arbutine, Acide Kojique



DERMOLISSAGE Vitamin C FORMULA (Anti-Age, Anti-Oxydants & radicaux libres)


Principe actif dominant : Sodium Ascorbyl Phosphate (Vitamin C (L-ascorbic acid)), Tocopheryl Acetate (vitamin E), Sodium Hyaluronate (acide hyaluronique pure), Allantoïne et Dipotassium Glycyrrhizate (agents anti-inflammatoires)

Fonction des principaux agents :

Aloe Barbadensis	Réduit l'inflammation, apaise la peau, accélère la récupération, empêche l'infection, antiseptiques, réhydratant
Acide Salicylique	Traite l'acné, exfolie, facilite l'absorption
Arbutine	Agent blanchissant naturel double actions, pénètre la peau sans nuire à la concentration des cellules, empêche effectivement l'activité de la tyrosinase dans la peau, empêche efficacement la formation de mélanine
Extrait de Mûrier	Co-agent éclaircissant de la peau
Acide hyaluronique	hydrate
Allantoïne	Guérit, hydrate, apaise, soulage l'irritation, traite efficacement les brûlures, les blessures et l'acné

Qu'est-ce que la Dermalinfusion ?

Une dépression est créée à l'extrémité de la pièce à main dès le contact avec la peau. Les diamants de la tête de soin exfolient alors la couche cornée lors du déplacement de la pièce à main. Les solutions sont amenées sous pression directement dans la tête de soin, irrigant directement les zones à traiter.

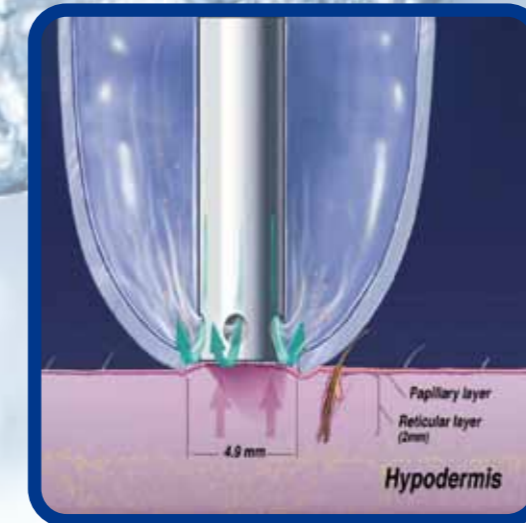

Le *Perfect'Skin* :
Élimine la couche cornée;
Injecte sous pression les solutions sous l'épiderme;
Crée une dépression qui aspire les tissus abrasés et les évacue dans le container de déchets.

Double Contrôle, Double efficacité !

- Le réglage de la dépression et du débit permet de contrôler avec précision l'exfoliation et l'injection.
- Réglage de la dépression jusqu'à 100 KPa
- Réglage du débit jusqu'à 100 ml/mn



Perfect'Skin Dermalinfusion :

Accueillez votre peau renouvelée !
Dites Adieu à :

- L'acné (Visage, dos, poitrine);
- Aux vergetures (seins, ventre, hanches);
- La cellulite superficielle/ aux capitons (fesses, ventre, cuisses);
- Teint inégal;
- Une peau épaisse et rugueuse.